

# AMD 200

Secador de Membrana de Ar

Código do produto: 3302252




## Descrição

Capaz de fornecer fluxos de até 200 L/min, o sistema de secagem AMD 200 é compatível com qualquer fonte de ar comprimido, oferecendo um equipamento leve e compacto para qualquer laboratório que utilize ar limpo e seco. Sem peças móveis, o sistema AMD 200 é silencioso em operação. Este sistema de secagem possui mínimos requisitos de manutenção, fornecendo uma fonte de ar limpo e seco para instrumentos a partir da alimentação de ar comprimido existente no laboratório.



## Dicas de aplicação

LC-MS requer ar seco Outras aplicações de laboratório que requerem ar seco

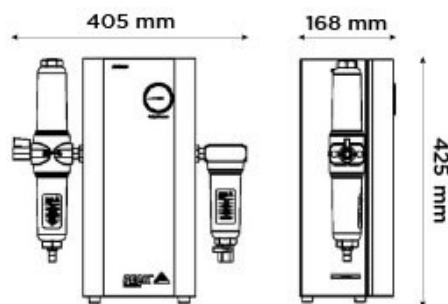

## Generator Details

- **Tipos de gases:** Ar
- **Compressor integrado:** Não

## Características principais

- Fluxo de até 200 L/min
  - Pressão de até 120 psi
  - Fornece ar limpo e seco
  - Design compacto que economiza espaço
  - Funcionamento totalmente silencioso
  - Poucos itens consumíveis substituídos garantem baixo custo com manutenção ao longo de sua vida operacional
- Se necessário, pode funcionar 24 hpras por dia, 7 dias por semana com excelente desempenho
- O gerador só precisa estar conectado à fonte de ar e ao aplicativo

## Especificações técnicas

	AMD 200
Tipo de gás	Ar
Fluxo máx. de gás:	200L/min
Pressão máx. de saída:	120psi/8,3bar
Pressão máx. de saída:	120psi/8,3bar
Máx. pureza:	99.50%
Conexão de saída de gás:	1 x 1/4 " BSPP
Qualidade mín. do ar de entrada:	110psi/7,6bar
Pressão máx. de entrada:	145psi/10bar
Qualidade mín. do ar de entrada:	ISO 8753-1:2010 Class 1.4.1
Temperatura máx. de operação:	35°C / 95°F
ftalatos:	Phthalate & BHT Free
Tamanho (AxLxP) mm	425 x 405 x 168 mm
Tamanho (AxLxP) pol.	16,7 x 15,9 x 6,6 inches
Peso do gerador	8kg / 17,6lbs

# [PEAK Protected]<sup>TM</sup>

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: [www.peakscientific.com/ordering/](http://www.peakscientific.com/ordering/)
- For service plans visit: [www.peakscientific.com/service/service-plans/](http://www.peakscientific.com/service/service-plans/)

**Peak Scientific UK**  
Tel: +44 (0)141 812 8100  
Fax: +44 (0)141 812 8200

**Peak Scientific North America**  
Tel: +1-800-767-6532  
Fax: +1-978-608-9503

**Peak Scientific China**  
Tel: +86 21 5079 1190  
Fax: +86 21 5079 1191  
For a full list of our worldwide office locations, please visit:  
Web: [www.peakscientific.com](http://www.peakscientific.com)  
Email: [discover@peakscientific.com](mailto:discover@peakscientific.com)

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

